

**CS**  
MEDICA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-333-BK CS-333-WT (с зарядным устройством)



Одобрено  
Стоматологической  
Ассоциацией России

**EAC**

Благодарим Вас за приобретение  
зубной щетки CS-333



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: предоставления печати продавца и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для гигиены полости рта.

#### 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

##### Предупреждение:

*Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезной травме.*

- Рекомендованный возраст для пользования данной зубной щеткой – от 12 лет.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеследующего:
  - чувствительные зубы или десны;
  - недавно перенесенная периодонтальная или стоматологическая хирургическая операция;
  - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой.
- Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте для удаления пятен от табака или отбеливания зубов, могут серьезно повредить эмаль в случае их продолжительного использования. Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед тем, как начать использование зубных паст с повышенным содержанием абразивных веществ.
- Не подключайте зарядное устройство к сети мокрыми руками.
- Подключайте устройство к электрической сети с требуемыми параметрами.
- Не допускайте попадания воды на зарядное устройство и адаптер, они не являются водонепроницаемым.
- Не используйте зарядные устройства, не предназначенные для зарядки данной зубной щетки.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми, а также острые элементы, которые могут поранить ребенка.
- Храните устройство вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.

- Не храните устройство в местах, подверженных сильным ударам или вибрации (например, в местах, где устройство легко может упасть на пол).

Соблюдайте следующие правила обращения с сетевым шнуром:


- Не повреждайте и не обрывайте шнур.
- Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте шнур.
- Не вносите изменения в конструкцию шнура.
- Не кладите тяжелые предметы на сетевой шнур.
- Не используйте сетевой шнур с поврежденным проводом. Не пользуйтесь разболтанным гнездом питания.

##### ⚠ Внимание:

*Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.*

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Обращайтесь с зубной щеткой и зарядным устройством аккуратно. Не роняйте их и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство и адаптер, предназначенные для данного прибора. При работе с другим зарядным устройством и адаптером возможно повреждение/выход из строя прибора.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.

#### 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

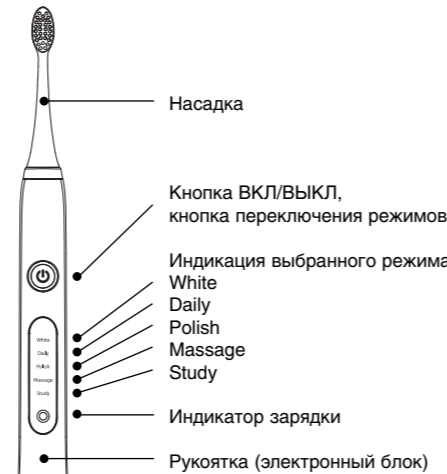

Зарядное устройство




Дополнительно можно приобрести: Насадки CS Medica SP-31-BK и SP-31-WT для электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-333 (в комплекте 2 насадки).

#### 3. ПОДЗАРЯДКА

Особенностью CS-333 является возможность подзарядки через USB разъем или с помощью сетевого адаптера.

1. Установите зубную щетку в гнездо для основного устройства (см. рисунок).

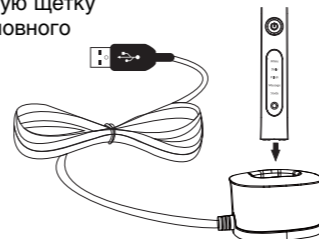

2. Выберите один из следующих способов подзарядки:

- 2.1. От электросети 220 В  
Соедините USB кабель с адаптером переменного тока. Вставьте вилку в электрическую розетку.
- 2.2. Подсоедините USB кабель к USB разъему компьютера.

Начнется зарядка, на что укажет загоревшийся красным цветом индикатор зарядки. После того, как зубная щетка будет полностью заряжена, индикатор зарядки погаснет.

Общее время полной зарядки составляет примерно 16 часов.

##### Примечания:

- После приобретения зубной щетки сразу же зарядите ее до максимального уровня (без перерывов).
- В процессе зарядки главное устройство и зарядное устройство могут немного нагреваться.
- Во время зарядки включить питание щетки не удастся.

#### 4. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

В комплект CS-333 входит одна стандартная насадка, которая идеально подходит для ежедневной заботы о красоте и здоровье полости рта.

Установите насадку на металлический стержень корпуса щетки так, чтобы щетина была расположена на одной стороне с лицевой частью щетки. Прижмите насадку до упора. Между кольцом и рукояткой щетки находится небольшой зазор.

#### 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого поместите щетку в ротовую полость.

##### Примечание:

*Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.*

2. Включите питание, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  
Головка щетки начинает вибрировать. Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.
3. В течение 5 секунд после включения щетки Вы можете выбрать один из 4 основных режимов чистки или режим «Обучение» последовательным нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.



**Режим «White» («Отбеливание»)**  
Рекомендуется для особо тщательного удаления налета



**Режим «Daily» («Ежедневный»)**  
Рекомендуется для ежедневного использования, идеально подходит для чувствительных зубов и десен



**Режим «Polish» («Полировка»)**  
Рекомендуется для дополнительной полировки зубов для придания блеска эмали



**Режим «Massage» («Массаж»)**  
Рекомендуется для профилактического массажа десен



**Режим «Study» («Обучение»)**  
Рекомендуется для облегчения привыкания к щетке.


При первом включении устройство запускается в режиме White, установленном по умолчанию. Впоследствии при очередном включении всегда включается последний использованный режим.

##### Режим «Обучение»

Для облегчения привыкания к звуковой зубной щетке первые несколько чисток можно пользоваться режимом «Обучение». Интенсивность вибрации щетинок постепенно возрастает, достигая стандартных величин (режим "White") к 13 чистке.

Чтобы заново активировать режим после прохождения 12 чисток, необходимо снова переключить режимы с первого (White) на последний (Study).


##### Промежуточный таймер

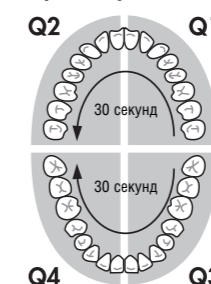

Щетка делает на мгновение паузу каждые 30 секунд, что ориентирует Вас на равномерную очистку всех участков полости рта.

Рекомендованная последовательность чистки – правый верхний квадрант (Q1), левый верхний квадрант (Q2), правый нижний квадрант (Q3), левый нижний квадрант (Q4).

##### Правильная чистка зубов:

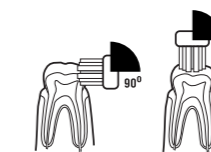

Поверхность зуба и окклюзионная поверхность: во время чистки держите щетину под углом 90° к поверхности зуба.



Граница между зубами и десной: во время чистки держите щетину под углом 45° к поверхности зуба.



Задняя сторона резцов или область неровно расположенных зубов: вертикально прижимайте головку щетки к зубу и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения зубов.

4. Завершив чистку зубов, не вынимая щетку изо рта, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ чтобы выключить зубную щетку.
5. Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.
6. Протрите рукоятку мягкой сухой тканью перед тем, как установить ее в гнездо зарядного устройства.
7. Установите рукоятку в гнездо зарядного устройства, а насадки в отсек для хранения насадок.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Сроки гарантии:**  
**Рукоятка (электронный блок) – 2 года**  
**Насадка – 3 месяца**  
**Адаптер – 2 года**

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

